

GÉZATONE

LASER HAIR

Лазерная щетка Gezatone HS 586



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИБОР GEZATONE LASER HAIR
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ:


- для улучшения качества волос
- для уменьшения выпадения волос
- для устранения перхоти и жирности кожи головы
- для расслабления и уменьшения признаков стресса
- для восстановления функций кожи головы и снятия зуда
- для поддержания нормального роста волос в пожилом возрасте
- для восстановления волос после окрашивания и химической завивки
- для уменьшения негативного воздействия окружающей среды
- для профилактики выпадения волос при стрессовых состояниях и сниженном иммунитете



ПРИЧИНЫ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС



- ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР (НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ)
ПОВЫШЕННАЯ ВЫРАБОТКА ГОРМОНОВ

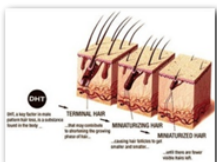

- НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ (НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА
И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ)



- НЕГРАМОТНЫЙ УХОД
- ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ



- СНИЖЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
- СТРЕСС, УСТАЛОСТЬ, БОЛЕЗНИ



- НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ (ДИЕТЫ)
- НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ, МИКРОЭЛЕМЕНТОВ



LASER HAIR ОСТАНОВИТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС И ВЕРНЕТ ИМ СИЛУ!

Для предотвращения выпадения волос и восстановления роста здоровых волос и разработана лазерная расческа Gezatone Laser Hair, HS586, которая вобрала в себя всю мощь наиболее популярных методик для улучшения состояния волос.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНОЙ ЩЕТКИ GEZATONE LASER HAIR:

- значительно укрепит волосы
- остановит их выпадение
- устранит признаки перхоти
- нормализует работу сальных желез
- улучшит качество волос
- сделает их густыми и блестящими.



ФУНКЦИИ ПРИБОРА

В приборе Gezatone Laser Hair сочетаются две функции: лазерное излучение и вибромассаж

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.



Лазерная терапия с успехом применяется в косметологии для решения многих эстетических недостатков, в том числе проблемы кожи головы и волос. Лазерное излучение стимулирует активность волосяных луковиц, включая «спящие», в результате чего ускоряется рост волос, волосы становятся более прочными, гладкими. Лазерное излучение оздоравливает кожу, препятствует появлению перхоти, регулирует работу сальных желез, снижает повышенную выработку кожного сала, способствует синтезу витамина D, необходимого волосам.



ФУНКЦИЯ ВИБРОМАССАЖА выполняется массажной щетиной из мягкого пластика. Легкий и приятный массаж способствует улучшению кровообращения и лимфотока, стимулирует процессы насыщения кожи головы кислородом и питательными веществами.

Вибромассаж способствует уменьшению головной боли, снятию проявления усталости и стресса.

Благодаря вибромассажу спящие волосяные луковицы пробуждаются, что приводит к росту новых здоровых волос.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

- Процедура выполняется по чистым, сухим волосам.
- Перед началом процедуры необходимо вымыть волосы шампунем, дать высохнуть или посушить феном.
- Волосы расчесываются щеткой медленными плавными движениями, при этом необходим контакт с кожей головы.
- Движения щетки производятся в направлении от лба и висков к затылку.
- Время выполнения процедуры 10–15 минут.
- По окончании нанесите на кожу головы и корни волос ампулу с активным концентратом против выпадения волос.
- Для поддержания результата между процедурами рекомендуется наносить на кожу тоник против выпадения волос.
- Курс 30–40 процедур с интервалом 1–2 дня.



LASER HAIR

Лазерная щетка Gezatone HS 586

GÉZATONE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

KATIVA

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ШАМПУНЬ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
С БИОТИНОМ

для профилактики и
снижения выпадения
волос и стимуляции
роста новых волос

ФОРМУЛА БОГАТА ПРОТЕИНАМИ,
АМИНОКИСЛОТАМИ
И НАТУРАЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ



ТОНИК ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
С БИОТИНОМ

для предотвращения
выпадения волос и
стимуляции роста
новых волос

СОДЕРЖИТ БИОТИН, АРГИНИН
И РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕИНЫ

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС В
АМПУЛАХ



СОДЕРЖИТ БИОТИН,
ВИТАМИН ГРУППЫ В,
ПРОТЕИНЫ, ЭКСТРАКТЫ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективность использования метода зависит от исходного состояния Ваших волос и волосяных луковиц. Чем раньше будет начато воздействие, тем лучше будет видимый результат!

Проведенные клинические испытания показали:

БОЛЕЕ 90% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭТОЙ МЕТОДИКИ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕННЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

Лазерная щетка Gezatone «Laser Hair», модель HS585 для домашнего использования является абсолютно безопасной и простой методикой, не имеющей побочных эффектов, значительно улучшающей красоту и здоровье Ваших волос.

- УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ВЫПАВШИХ ВОЛОС
- УСИЛИВАЕТСЯ РОСТ НОВЫХ ВОЛОС И ПРОБУЖДАЮТСЯ СПЯЩИЕ ФОЛЛИКУЛЫ
- УЛУЧШАЕТСЯ КАЧЕСТВО ВОЛОС, ОНИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ И КРЕПКИМИ
- ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ И НОРМАЛИЗУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- Онкологические заболевания
- Беременность
- Острые воспалительные и гнойные заболевания кожи головы
- Ограничение использования предусмотрено при эпилепсии, тяжелых нарушениях сердечного ритма, при ношении кардиостимулятора, нестабильности артериального давления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Запрещается использовать в сочетании с гормональными средствами для стимуляции роста волос.
- Запрещается направлять в глаза лазерный излучатель, во избежание травмы глаз.
- Включать/выключать аппарат необходимо только сухими руками.
- Не используйте аппарат, если волосы влажные или мокрые, во избежание поломки устройства или удара электрическим током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Прибор для массажа кожи головы Laser Hair Gezatone HS586

Артикул: 1301092S

Напряжение питания: DC 3 В. (2 батареи 1.5 В., типоразмера AAA)

Потребляемая мощность: не более 0.12 Вт

Длина волны лазерного излучения: 650 нм

Класс (мощность) лазерного излучения: 3А (не более 5 мВт)

Диапазон допустимых температур воздуха: 15° С – 40° С

Допустимый уровень влажности воздуха: 20...65 %

Вес в упаковке: 0,19 кг

Габариты в упаковке: 190x120x40 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лазерная щетка – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Замечание: элементы питания не входят в комплект поставки.





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 500-95-94 (звонок бесплатный)

[WWW.SOZV.RU](http://www.sozv.ru)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

 odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

 facebook.com/sozvezdiekrasoti

 vk.com/sozvezdiekrasoti



Арт. 1301092S

