


MARUTAKA RF

Аппарат для RF-лифтинга

【Инструкция по эксплуатации】




Схема аппарата


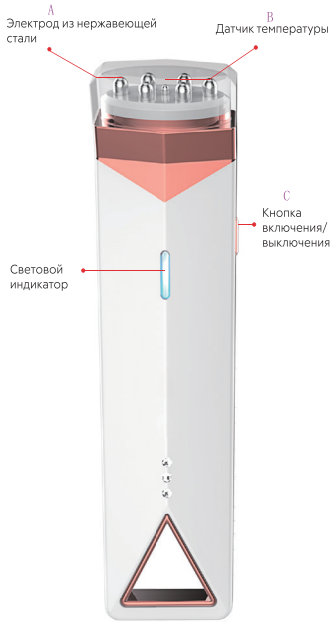


Шаг 2

Шаг 1

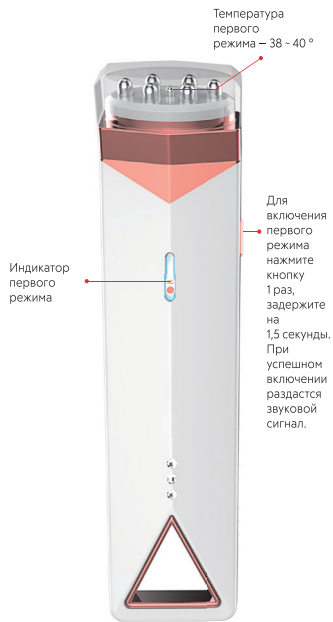

Шаг 3

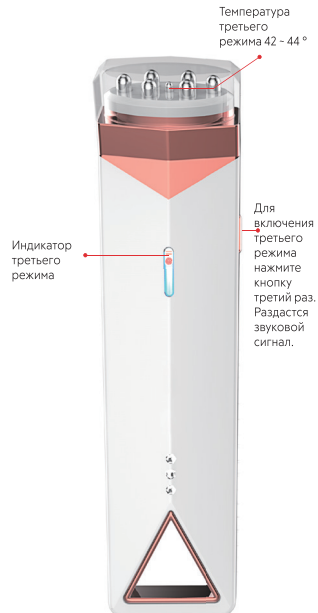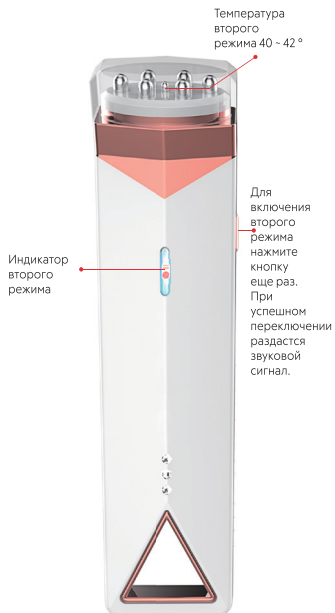

【Зоны применения】

Продолжительность использования




Что такое радиочастота?

Что такое RF-метод?

Радиочастота, или сокращенно RF — это технология омоложения кожи, которая пользуется все большей популярностью в развитых странах (Европе, Америке, Японии и Корее). Это высокочастотная переменная электромагнитная волна, частота которой колеблется до 300кГц.

Попадая в зону действия электромагнитного поля, молекулы воды в тканях начинают двигаться по определенной траектории, вырабатывая тепло. Волокна коллагена нагреваются до температуры 45-50 С, что приводит к их моментальному сокращению, восстановлению и здоровому росту нового коллагена. За счет чего происходит уплотнение дермы и повышение тургора кожи.

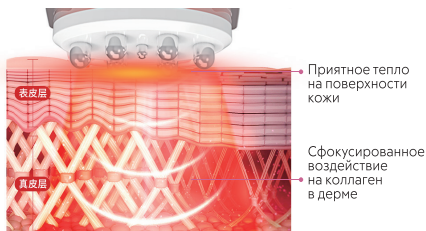

**При регулярном использовании
продлируется
эффект от процедуры**

【Руководство по эксплуатации】

1. Насухо протрите лицо и нанесите пептидную сыворотку.
2. Запустите прибор, зажав кнопку включения/выключения ("Buck") на 1,5 секунды. По умолчанию включится первый режим и загорится световой индикатор. Инструмент автоматически начнет вибрировать при соприкосновении с кожей. Температура первого режима составляет около 38–40 градусов. Коллаген в клетках дермы нагревается быстро – каждые три секунды. Рекомендуемое время воздействия на первом режиме – 360 секунд, через которое следует перейти на второй режим.
3. Нажмите на кнопку выключения/выключения, чтобы перейти на второй режим. Температура второго режима составляет 40–42С.
4. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы перейти в третий режим.

Внимание

- Запрещается использование аппарата на полностью сухой коже


Предупреждение: движущиеся элементы головки прибора должны всегда находиться в движении для обеспечения комфорта во время воздействия. Если элементы длительное время находятся без движения, возникает риск перегрева кожи или ожога.

После процедуры RF-лифтинга допускается легкое покраснение кожи и поверхностный отек кожи, которые быстро проходят без каких-либо дополнительных усилий. Такой эффект является абсолютно естественным и безопасным.

1
one

Подбородок

Выполняйте медленные движения по массажным линиям сверху вниз.

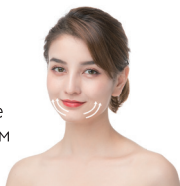

2
two

Область вокруг глаз

Медленно перемещайте прибор в области вокруг глаз.



3
three

Щеки

Выполняйте медленные круговые движения, начиная от уголков рта.



4
four


Лоб

Медленно перемещайте прибор от брови к линии роста волос.

5
five

Овал лица

Коррекция овала лица. Выполняйте медленные движения снизу вверх, формируя красивый овал.

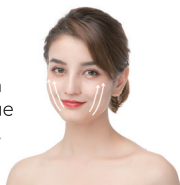


6
six

Шея

Перемещайте прибор в направлении сверху вниз.



Нагрев в области дермы способствует регенерации коллагена и восстанавливает кожу, что позволяет добиться выраженного эффекта омоложения и разглаживания морщин.

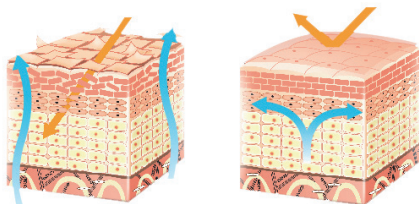

При воздействии на кожу электромагнитной волной происходит нагрев кожи в зоне дермы. В результате находящийся в дерме коллаген сжимается, что способствует активной регенерации кожи, повышению ее гладкости и упругости.

Результат использования RF-лифтинга в течение 12 недель

【Как зарядить устройство】

1. Убедитесь, что прибор выключен.
2. Убедитесь, что прибор сухой.
3. Подключите провод зарядного устройства к электросети. Положите прибор в гнездо зарядного устройства. Три световых индикатора начнут загораться по очереди, показывая, что аппарат заряжается. Когда процесс зарядки будет завершен, три индикатора загорятся одновременно. .



4. Зарядное устройство следует хранить в сухом месте при комнатной температуре. Не допускать попадания пыли.
5. Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуется проводить профилактическую зарядку, чтобы избежать преждевременной поломки аккумулятора.
6. Запрещается использовать адаптеры, не соответствующие параметрам прибора. Это приведет к поломке устройства.

Важно! Блок зарядки выполнен в соответствии с нормами по защите окружающей среды. Изделие НЕ является водонепроницаемым. При использовании прибор должен быть сухим. Использование влажного прибора неизбежно приведет к поломке.

Как очистить устройство





1. Запрещается использование чистящих средств с абразивами и антикоррозийных жидкостей (например, бензина или пропанола).
2. Перед очищением прибора убедитесь, что он выключен из сети.
3. Каждый раз после использования аппарата протирайте головку от остатков геля салфеткой или влажным полотенцем.
4. Помещайте прибор в зарядное устройство только после того, как он очищен от остатков геля.
5. Аппарат не является водонепроницаемым.
6. Категорически запрещается прикасаться к внутренним частям зарядного устройства руками или посторонними предметами — это может привести к поломке аккумулятора.

Название товара	Аппарат для RF-лифтинга
Модель	Marutaka RF
Входное напряжение	DC5V
Мощность	12W
Режимы	RF - лифтинг
Емкость аккумулятора	1000MA
Время зарядки	5 часов
Вес нетто	330 гр
Размер аппарата	175 mm x 46 mm x 34 mm
Размер упаковки	210 mm x 145 mm x 70 mm

Устранение неисправностей

Советы и предостережения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Аппарат не включается	Разряженная батарея Слишком короткое нажатие	Зарядите прибор Нажмите и удерживайте кнопку включения выключения в течение 1,5 секунд
Головка прибора не нагревается до нужной температуры	Недостаточное напряжение в сети Недостаточное количество сыворотки Головка прибора не плотно прилегает к коже	Подключите прибор к другой сети Увеличьте количество пептидной сыворотки Прижмите головку устройства плотнее к коже
Отсутствует вибрация	Головка прибора недостаточно плотно прилегает к коже Недостаточное напряжение в сети Слишком сухая кожа не проводит электричество	При малейших признаках неисправности (появлении специфического запаха, чрезмерном нагревании прибора во время зарядки) немедленно отключите устройство от сети и, не включая его, отнесите в ремонт.
Устройство не заряжается	Параметры вашей электрической сети и параметры прибора не совпадают Зарядное устройство не подключено к сети	Подключите прибор к другой сети Подключите зарядное устройство к сети

 запрещено разбирать	Ни в коем случае самостоятельно не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство, так как это может стать причиной удара током и пожара.
 отсоединение шнура питания от розетки	При извлечении устройства из розетки не тяните за провод, так как это может привести к разрыву провода и удару током. Уловите свое
	Отсоединяйте шнур от источника питания, когда прибор не используется. Не делайте этого мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.
	При малейших признаках неисправности (появлении специфического запаха, чрезмерном нагревании прибора во время зарядки) немедленно отключите устройство от сети и, не включая его, отнесите в ремонт.
 не использовать!	Не используйте прибор, если шнур питания поврежден, это может вызвать короткое замыкание, возгорание и поражение электрическим током.
	Не повреждайте и не перегибайте электрический шнур, так как это может привести к его разрыву.
	Не используйте удлинители для зарядки аппарата, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию, удару током или поломке прибора.
 запрещено	Не допускайте использования прибора детьми. Храните прибор вдали от детей.

MARUTAKA RF

ГАРАНТИЯ

Наименование:	Marutaka RF
Гарантийный срок:	1 год
Место покупки:	
Дата покупки:	

Телефон сервисной службы: +7 (495) 411-90-71

CLUBSANTE

Эксклюзивный дистрибьютор
www.clubsante.ru +7 (495) 411-90-71